


# Сильна кровотеча на руці або нозі Накладіть С-А-Т® Турнікет

zz-0723-UA · REV030922

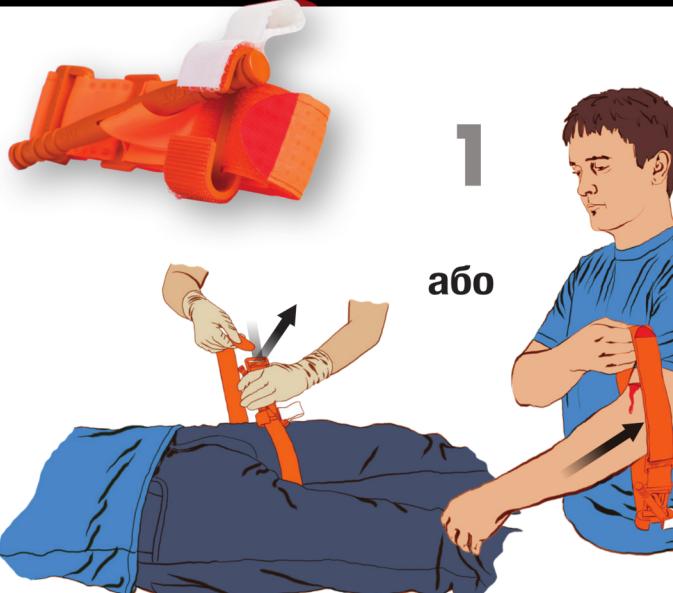

## НАКЛАДАННЯ ДВОМА РУКАМИ

Розташуйте турнікет навколо кінцівки, проведіть червоний наконечник через проріз пряжки та накладіть турнікет на 5-8 см над місцем кровотечі безпосередньо на шкіру.\*

або

## НАКЛАДАННЯ ОДНОЮ РУКОЮ

Одягніть петлю турнікету на пошкоджену кінцівку та розташуйте турнікет на 5-8 см над місцем кровотечі безпосередньо на шкіру.\*

Щільно затягніть стрічку і затягніть її на до кінця, але не над стержнем.

Пов'язка має бути досить тugoю, щоб кінчики трьох (3) пальців НЕ МОЖНА були просунуті між стрічкою та кінцівкою. Якщо кінчики трьох (3) пальців проходять під стрічку, дотягніть і закріпіть.

Закручуйте стержень доти, поки кровотеча не зупиниться.

Закріпіть стержень всередині фіксуючої скоби. Перевірте наявність кровотечі та дистального пульсу.



Якщо кровотеча не контролюється або є дистальний пульс, розгляніть можливість додаткового затягування або застосування другого турнікету над першим і поруч із ним. Перевірте знову.



Проведіть стрічку між скобами та над стержнем.

Накройте стержень і стрічку за допомогою ремінця для написання часу.

Вкажіть час накладання.

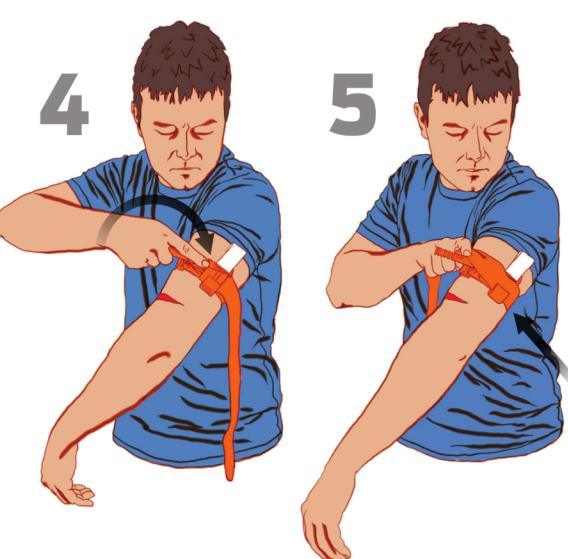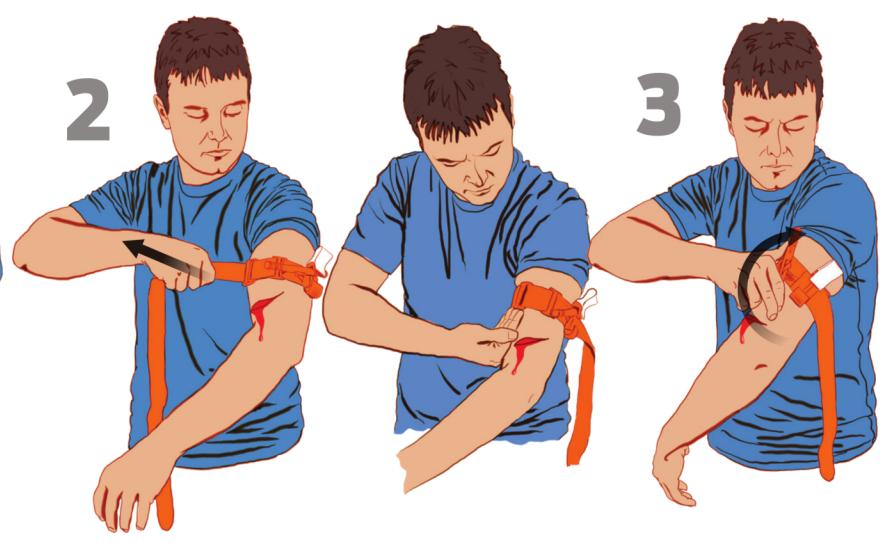

# Сильна кровотеча на руці або нозі Накладіть С-А-Т® Турнікет

zz-0723-UA · REV030922



## НАКЛАДАННЯ ДВОМА РУКАМИ

Розташуйте турнікет навколо кінцівки, проведіть червоний наконечник через проріз пряжки та накладіть турнікет на 5-8 см над місцем кровотечі безпосередньо на шкіру.\*

або

## НАКЛАДАННЯ ОДНОЮ РУКОЮ

Одягніть петлю турнікету на пошкоджену кінцівку та розташуйте турнікет на 5-8 см над місцем кровотечі безпосередньо на шкіру.\*

Щільно затягніть стрічку і затягніть її на до кінця, але не над стержнем.

Пов'язка має бути досить тugoю, щоб кінчики трьох (3) пальців НЕ МОЖНА були просунуті між стрічкою та кінцівкою. Якщо кінчики трьох (3) пальців проходять під стрічку, дотягніть і закріпіть.

Закручуйте стержень доти, поки кровотеча не зупиниться.

Закріпіть стержень всередині фіксуючої скоби. Перевірте наявність кровотечі та дистального пульсу.

Якщо кровотеча не контролюється або є дистальний пульс, розгляніть можливість додаткового затягування або застосування другого турнікету над першим і поруч із ним. Перевірте знову.



Проведіть стрічку між скобами та над стержнем.

Накройте стержень і стрічку за допомогою ремінця для написання часу.

Вкажіть час накладання.

